

„Eine wasserdichte Matratzenauflage, die mittels Klettgurten zur Wanne wird – für mich ein geniales Prinzip, für meine Patienten jedesmal eine Wohltat!“

Sven M., Krankenpfleger  
in Reinbek bei Hamburg



Flexible Duschwanne aus atmungsaktivem und wasserdichtem Stoff mit integriertem Abflusstutzen.

Die Duschwanne kann als Matratzenauflage dauerhaft verwendet werden, da sie wie ein herkömmliches Spannbettlaken gelegt werden kann.

Klettspanngurt

seitenfixierender  
Klettverschluss

Rückseite der Duschwanne  
aus Frottee

## Die Dusche, die ans Bett kommt.

Das HEIWASCH Bettduche-System ist unabhängig von Frischwasserversorgung und Abwasserentsorgung einsetzbar. Die optimale Hygiene entspricht optimaler Verfügbarkeit.



Nichts geht über das Gefühl, frisch geduscht zu sein. Erst recht im Krankheitsfall.



HEIWASCH – Die Bettduche mit System  
Steglitzer Str. 15 · D-21502 Geesthacht  
Telefon +49 (0) 4152 / 83 77 140 · Fax +49 (0) 4152 / 83 77 143  
E-Mail: info@heiwasch.de  
[www.heiwasch.de](http://www.heiwasch.de)




# HEIWASCH - Die Dusche, die ans Bett kommt.

Wenn einem Menschen durch krankheitsbedingte Umstände die komplette Bewegungsfreiheit genommen wird, kann eine wohltemperierte Dusche wahre Wunder bewirken. Denn nur eine frische Dusche sorgt für ein Sauberkeitsgefühl, das durch die konventionelle Reinigungsweise mit einem feuchten Waschlappen nicht annähernd zu erreichen ist.

## Unkompliziert, hygienisch und überall einsetzbar.

- Es sind keine Frisch- und Abwasserstellen im Krankenzimmer erforderlich.
- Ständig frisches, fließendes und wohltemperiertes Wasser sorgt für optimale Hygiene.
- Das oft mühsame Umbetten des Patienten entfällt.
- Die flexible Duschwanne kann bei Bedarf für jede Bettgröße individuell hergestellt werden.
- Kostenübernahme bei Indikation durch die Pflegekasse (Registrierung im Pflegehilfsmittelverzeichnis, Nr. 51.45.01.1001).

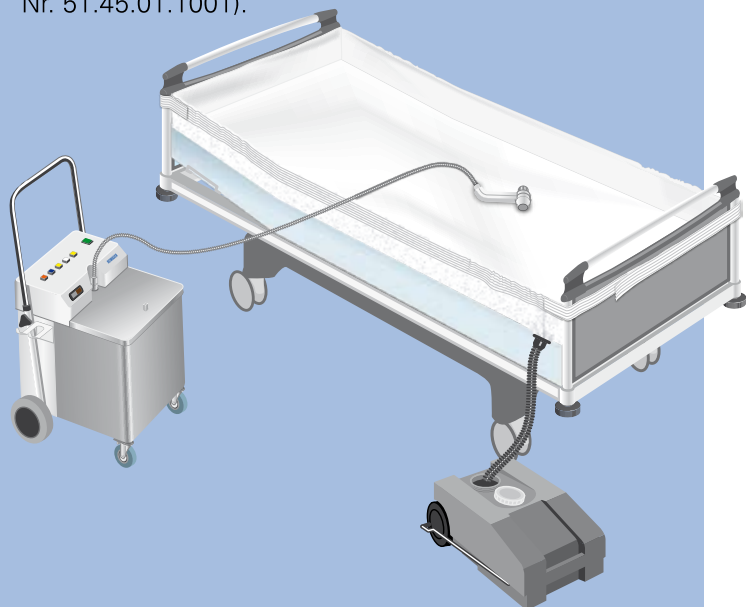

## So funktioniert's:

### Fünf Schritte zur umfassenden Patientenpflege:




1. Duschwagen mit Frischwasser befüllen und anschließen.




2. Die wasserdichte Matratzenwanne wird mit Klettbindern am Bettrahmen befestigt.



3. Der Abwasserschlauch wird am Abwasserwagen angeschlossen.

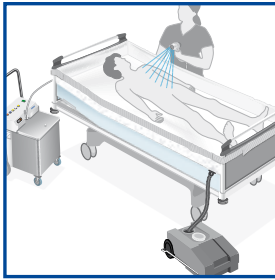


4. Die Dusche kann beginnen.

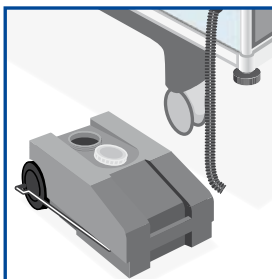


5. Abwasserwagen abmontieren, anschließend entleeren.



### Zusätzlicher Komfort: Unsere praktische Kopf- und Haarwaschwanne

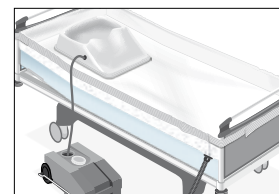

Kopf- und Haarwaschwanne an Abwasserwagen anschließen.

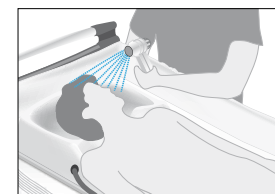

Die Kopf- und Haarwäsche kann beginnen.

Info-Fax 04152 / 83 77 143

### Ich interessiere mich für die HEIWASCH-Bettdusche mit System.

- Bitte senden Sie mir weiteres Informationsmaterial.
- Ich bitte um ein unverbindliches Beratungsgespräch.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
ggf. Institution/Klinik

\_\_\_\_\_  
Funktion

\_\_\_\_\_  
Land

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Fax

Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne entgegen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_